Instrukcja programowania pilota Med-Link v6 z mikrokontrolerem STM32L432KC Nucleo

Potrzebne darmowe oprogramowanie ściągniemy ze strony producenta mikrokontrolera:


https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubeprog.html

Wymagane będzie podanie swojego adresu email, na który przyjdzie link do pobrania programu STM32CubeProgrammer. Instalację można wykonać na domyślnych ustawieniach instalatora. Należy zezwolić na instalację sterowników. Płytka Nucleo ma wbudowany programator / debugger, więc wystarczy podłączyć port microUSB z płytki do gniazda USB komputera.


Widok okna programu po uruchomieniu: Memory & File edition Open file Data width 32-bit ▼ Find Data 4000 Norma swv No data to display Software reset Disabled 3.24 V arget voltage Verbosity level

1 2 3 13:29:37 : STM32CubeProgrammer API v2.7.0 4

Po lewej stronie są rozwijane zakładki z opisem do czego służą:

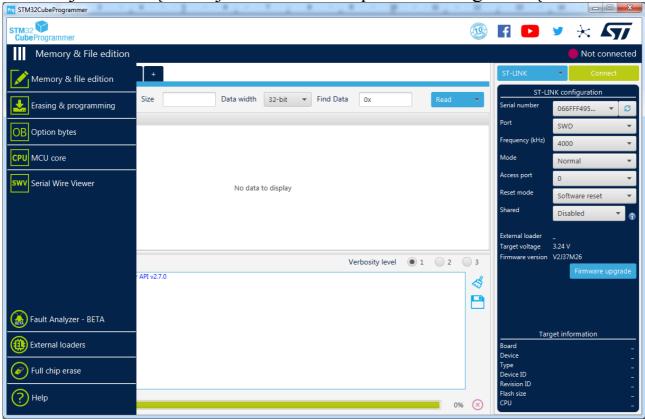


W zakładce "Erasing & programming" należy wskazać pobrany z githuba plik wsadowy z programem dla pilota v6, Med Link v6.bin:

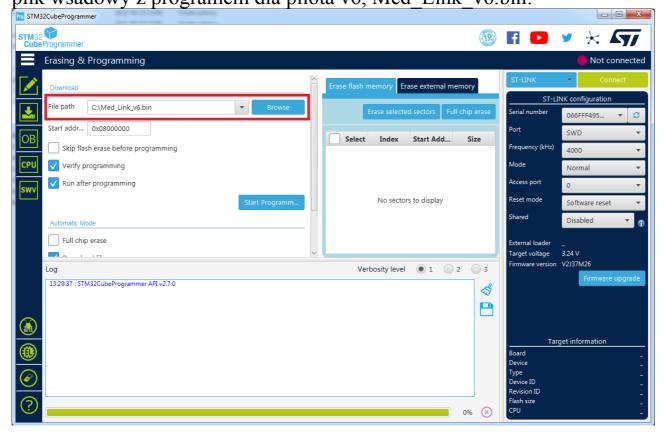

W prawym górnym rogu wybrać typ połączenia "ST-LINK" i nawiązać

połączenie z płytką Nucleo przez kliknięcie "Connect":

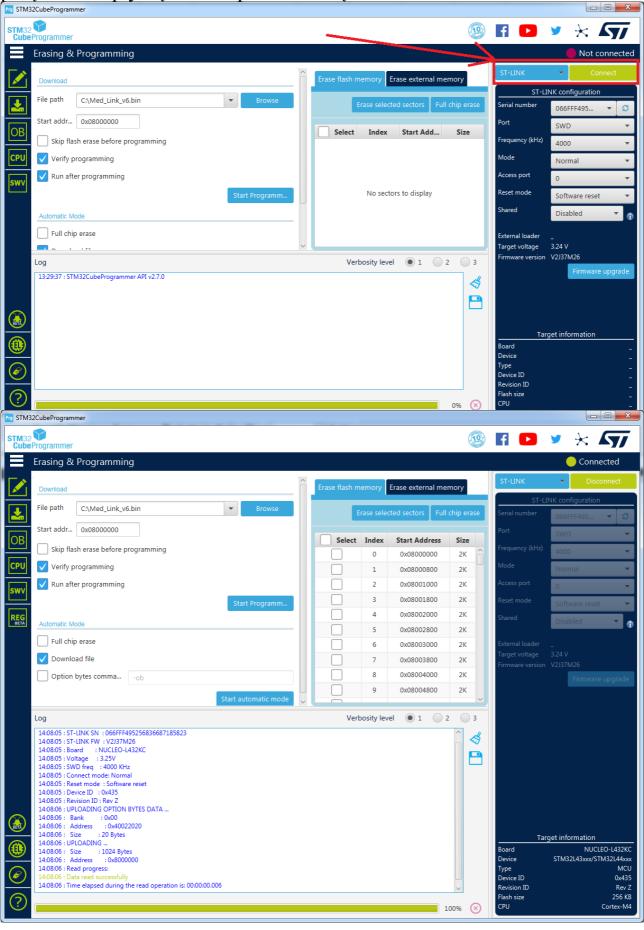

STM32CubeProgrammer automatycznie nawiąże i rozpozna podłączoną płytkę Nucleo oraz wyświetli szczegółowe informacje w okienku z logiem. Jeśli połączenie jest prawidłowe, pozostało już tylko wgranie pliku poprzez kliknięcie w ikonę "Start Programm...". Procedura wgrania pliku jest bardzo szybka i jeśli weryfikacja przebiegła pomyślnie, to można zamknąć okienka o sukcesie poszczególnych operacji i zamknąć cały program STM32CubeProgrammer. To już wszystko, powodzenia!

